


SEALmatic P

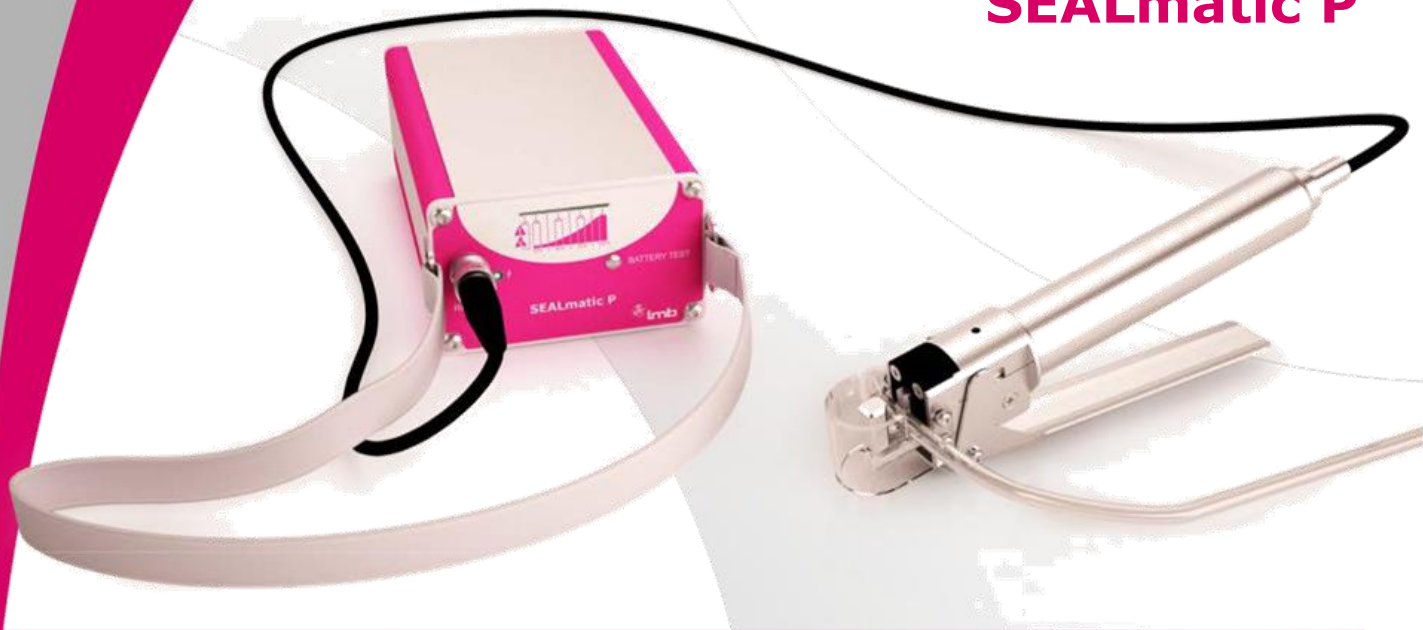

SEALmatic P vytváří perfektní sváry a nabízí maximální flexibilitu pro uživatele jako mobilní svářečka. Svým designem, nosným popruhem a nízkou vahou vykazuje vysoký stupeň mobility v odběrovém sále nebo při výjezdech. Svým nízkým svařovacím časem je perfektním pomocníkem při odběrech.

Charakteristiky

- Ergonomický design
- Uživatelsky přátelský
- Spolehlivý
- Automatické nastavení vysoké účinnosti a nízké spotřeby bateriově ovládaného přístroje
- Snadný přístup pro vložení hadičky
- Svár trvá pouze 1-3 sec
- Technologie nízké hemolýzy
- Vysoce přesný spínač k aktivaci svaru
- Snadné čištění
- Malá hlava pro transparentnost svařovacího procesu
- Automatický battery SLEEP časovač
- Automatický „buzení“ k zahájení sváření
- Sváření během nabíjení



Svařovací proces: monitoring sváření



Baterie – stav nabití baterie



Nabití baterie < 10% - sváření není povoleno

Lmb Technologie GmbH

Möslstr. 17
D-85445 Schwaig

Tel: +49 - 8122 - 880 96 - 0
Fax: +49 - 8122 - 880 96 - 60
www.lmb.de
info@lmb.de

SEALmatic P



Technická data

Rozměr 60(v) x 100(š) x 178(d) mm
Váha 1,35 kg vč. baterie

Napájení

Napětí 100-240 VAC
 Frekvence 50-60Hz
 Spotřeba (sváření) 200VA max
 Spotřeba (standby) 3VA max

RF generator


Nominalní výkon 50W pro zátěž res. 50 Ohm
 Svařovací frekvence 40,68 MHz±5kHz

Svařovací kleště

Mezera mezi čelistmi (otevřeny) 5 ±0,2mm
 Mezera mezi čelistmi(zavřeny) 0,07mm
 Délka RF kabelu: 168 cm
 Váha kleští s kabelem: 0,4 kg
 Rozměr: 220 / 70 mm
 Materiál: nerez ocel, mosaz a plast
 LED indikátor ve svařecí hlavě
 RoHS kompatibilní

Okolí

Pracuje při teplotě okolí 10°C - +40°C
 Skladování -20°C - +50°C

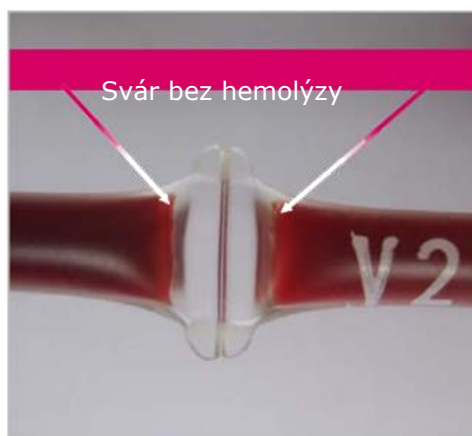

Svár bez hemolýzy

■ oblast svařování



Lmb Technologie GmbH

Möslstr. 17
 D-85445 Schwaig

Tel: +49 - 8122 - 880 96 - 0

Fax: +49 - 8122 - 880 96 - 60

www.lmb.de

info@lmb.de